

シンターダイヤモンドポイント

# ダイヤシャープポイント



ジルコニアは“硬い”だから、

## ダイヤシャープで削る。



*Because zirconia is "It is hard", it cuts down in Dia-Sharp.*

### ● 芯まで使える耐久性&切削感


メタルボンド焼結法(シンターダイヤ)

ダイヤシャープはダイヤモンドと金属の粉を  
高温高圧で塊かたまりにしています。

電着ダイヤポイントと違い、芯までダイヤが詰まっているので、表面のダイヤが削れたり劣化しても新しいダイヤが下から出てきて切れ味が続きます。

目立て専用ドレッサーを使うことで、さらに切れ味が持続します。

### シンターダイヤのイメージ図

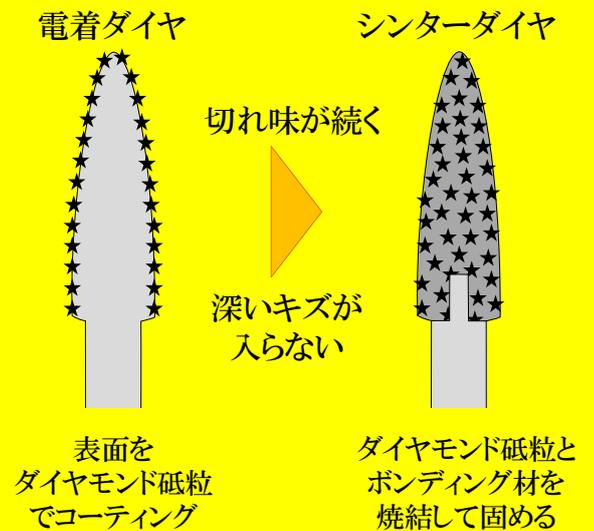


株式会社マシンツール中央  
MACHINE TOOL CHUO  
HYOGO JAPAN

販売代理店  
TMS デンタル

# ダイヤモンドシャープポイント

●形態：10種 ●包装：1本入

シンターダイヤはダイヤモンドと金属の粉を高温高压で塊にしています。電着ダイヤモンドと違い、芯までダイヤが詰まっているので、表面のダイヤが削れても新しいダイヤが下から出てきて切れ味が続きます。目立て専用ドレッサーを使うことでさらに切れ味が持続します。

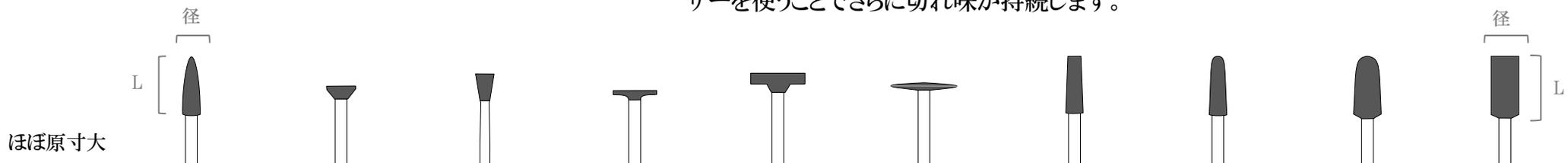

型番	102	202	204	301	302	304	501	601	602	702
L (mm)	10	2	5	0.5	2	1.2	10	10	10	10
径 (mm)	3	5	3	8	10	10	3	3	5	5
粗さ	M・MF・P・PF	P・PF	P	P	M・MF・P・PF	P・PF	P・PF	P	P	P
シャンク	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP
回転速度	≥50,000	≥50,000	≥50,000	≥50,000	≥30,000	≥30,000	≥50,000	≥50,000	≥30,000	≥30,000
価格	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥9,000	¥9,000	¥9,000	¥6,000	¥6,000	¥9,000	¥9,000

粗さ	色	用途
M	赤	金属用の中目
MF	緑	金属の細目
P	青	ジルコニア・陶材用の中目
PF	黄	ジルコニア・陶材用の細目

シンターダイヤ目立て専用ドレッサー

### シンターダイヤ用ドレッシングストーン

シンターダイヤの優れた切れ味が芯まで続くという本来の性能を発揮させるためには必ず専用ドレッサーを使用してください。シンターダイヤにダイヤモンドドレッサーを使用すると、切れ味が悪くなってしまいますので絶対に使用しないでください。

●形態：1種 ●包装：1コ入 ●価格：¥ 2,000



製造販売元



株式会社マシンツール中央  
MACHINE TOOL CHUO  
HYOGO JAPAN

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町7-5  
Tel: 0798-37-0270 Fax: 0798-37-0230  
www.mt-chuo.jp

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読み下さい。

※色調は印刷のため、現品と若干異なります。  
※価格は標準価格です(消費税は含まれておりません)。  
※掲載の価格は2014年10月現在の物です。

TMS デンタル

〒206-0811 東京都稲城市押立1715-16

TEL&FAX 042-379-8422

URL <http://tmsdental.com>