

# ペルーラダイヤ

●形態：13種

ほぼ原寸大です。

CA

HP

形状

ジルコニア用

セラミックス用

品名 粗さ	CA4 (3本入)	CA7 (3本入)	CA8 (3本入)	CA9 (3本入)	H2025	H2015	H153	S25	S20	S12	P12	P5	P2 (3本入)
Z-M 粗	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 5,500	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,300	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,500
Z-MM 中粗	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 5,500	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,300	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,500
Z-F 中	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 5,500	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,300	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,500
Z-FF 細	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 5,500	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,300	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,500
Z-S 粗艶	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 5,500	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,300	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,500
Z-SM 中艶	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 5,500	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,300	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,500
Z-SF 細艶	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 6,000	● ¥ 5,500	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,300	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 3,900	● ¥ 5,500
HC 極粗					● ¥ 5,200	● ¥ 3,800	● ¥ 3,800	● ¥ 4,800	● ¥ 3,500		● ¥ 3,500	● ¥ 3,500	● ¥ 5,200
HM 粗					● ¥ 5,200	● ¥ 3,800	● ¥ 3,800	● ¥ 4,800	● ¥ 3,500		● ¥ 3,500	● ¥ 3,500	● ¥ 5,200
C 粗					● ¥ 5,200	● ¥ 3,800	● ¥ 3,800	● ¥ 4,800			● ¥ 3,500	● ¥ 3,500	
MC 中粗					● ¥ 5,200	● ¥ 3,800	● ¥ 3,800	● ¥ 4,800	● ¥ 3,500		● ¥ 3,500	● ¥ 3,500	● ¥ 5,200
M 中	● ¥ 3,100	● ¥ 4,500	● ¥ 4,900	● ¥ 5,200	● ¥ 5,200	● ¥ 3,800	● ¥ 3,800	● ¥ 4,800	● ¥ 3,500	● ¥ 2,800	● ¥ 3,500	● ¥ 3,500	● ¥ 5,200
MF 細					● ¥ 5,200	● ¥ 3,800	● ¥ 3,800	● ¥ 4,800			● ¥ 3,500	● ¥ 3,500	● ¥ 5,200
F 粗艶	● ¥ 3,100	● ¥ 4,500	● ¥ 4,900	● ¥ 5,200	● ¥ 5,200	● ¥ 3,800	● ¥ 3,800	● ¥ 4,800	● ¥ 3,500	● ¥ 2,800	● ¥ 3,500	● ¥ 3,500	● ¥ 5,200
SF 細艶	● ¥ 3,100	● ¥ 4,500	● ¥ 4,900	● ¥ 5,200	● ¥ 5,200	● ¥ 3,800	● ¥ 3,800	● ¥ 4,800	● ¥ 3,500	● ¥ 2,800	● ¥ 3,500	● ¥ 3,500	● ¥ 5,200

※色調は印刷のため、現品と若干異なります。  
※掲載の価格は2017年9月現在のものです。

※価格は標準価格です(消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読み下さい。

製造販売元

株式会社マシンツール中央  
MACHINE TOOL CHUO  
HYOGO JAPAN  
〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町 7-5  
Tel: 0798-37-0270 Fax: 0798-37-0230  
www.mt-chuo.jp

ペルーラダイヤ

PERLA-DIA  
made in Japan



Made **in** Japan の 実力

日本の研磨技術は  
世界を魅了する。




株式会社マシンツール中央  
MACHINE TOOL CHUO  
HYOGO JAPAN

美しい研磨を実現する。


ジルコニアの研磨は、3ステップ。

ジルコニア用のペルーラダイヤモンドは7種のラインナップがあり、切削感や仕上り面の好み等に合わせて使用できます。


ペルーラダイヤモンドZを用いた3ステップの研磨面

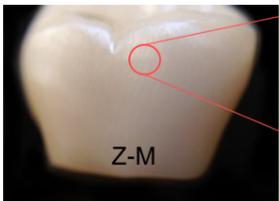

調整には Z-M

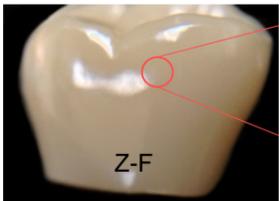

中研磨には Z-F

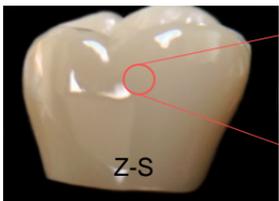


艶出しには Z-S

- Z-M
- Z-MM
- Z-F
- Z-FF
- Z-S
- Z-SM
- Z-SF

ダイヤモンドが動く、力強く柔らかい研削力

### ゴムの「柔らかさ」

遠心力によってダイヤモンドが表面から突出のすることで切削力を最大限活かします。また、ゴムの柔らかさによって切削時の衝撃を緩和するし、クラックのリスクを抑制します。

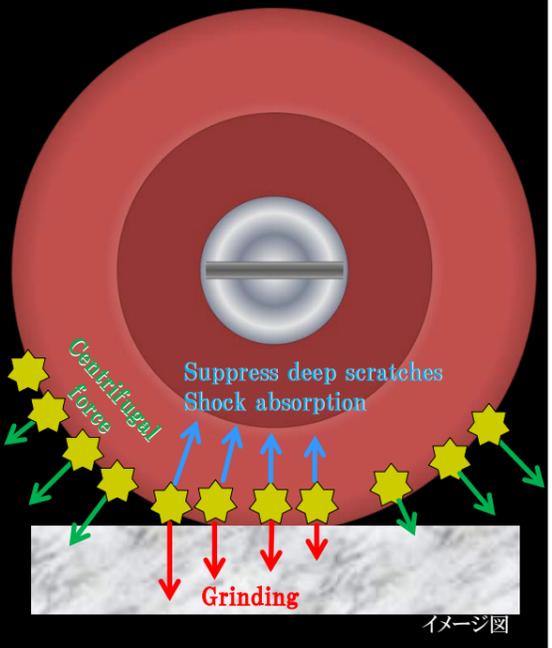

### 日本製の高い品質

自社工場の職人によりひとつひとつ丁寧に作り、手に取り品質管理をしています。大量生産には向かない生産方法ですが、患者と技術者(歯科医師、歯科技工士)のための製品ですので、ひとつひとつの品質に妥協をしません。

### ペルーラダイヤモンドの特長

- 切削力 || ダイヤモンドを高充填で配合
- 耐久性 || ゴムとダイヤモンドの接着技術
- 作業性 || マイクロスコープ下での視認性

### ナノサイズの研磨。

ナノサイズの美しい研磨面では、プラークの付着を抑制し、対合歯や口腔粘膜への影響が非常に少なくなります。そのため、すべての面を美しい研磨面に仕上げる必要があります。

### 硬さの異なる2種類をラインナップ

ジルコニアを削り磨き上げることに特化

#### ペルーラダイヤモンドZシリーズ

ペルーラダイヤモンドをベースにジルコニア専用配合を見直し開発を行いました。切削効率の向上と発熱を抑制しました。好みに合わせて粗番手から鏡面研磨までできる7種類揃えています。

汎用性の高さから30年以上のロングセラー

#### ペルーラダイヤモンド

ペルーラダイヤモンドは焼付け用陶材用として約30年前に開発されました。わずかな改善を重ねることで現在でもクラックのリスクの少ない安心感と切れ味、耐久性が良いと支持されています。

### 歯科医院におすすめ

3ステップ  
調整、艶出し

CA8Z トライアソート  
¥ 6,000 (M. F. S. 各1本入)

M(粗) F(中) S(細)



コントラングル用は、全3形態

CA4  
CA8  
CA9

